



AQUANEA

Wanna do automatycznego hydromasażu strefowego

wysokiej klasy armatura

GROHE
ENJOY WATER



PERFECT
LINE
2009
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

9 niezależnych stref
hydromasażu

kąpiel perełkowa

chromoterapia

elektroniczny panel
sterowania

anatomicznie
wyprofilowane wnętrze



REHABILITACJA
2008



EDYCJA XIV 2008
MEDAL
EUROPEJSKI



AQUANEA

ODNOWIENIE WODĄ

Wanna do automatycznego hydromasażu strefowego to połączenie najnowszej technologii, nowoczesnego designu z ergonomią kształtów.

Możliwości zabiegowe:

- hydromasaż wirowy z użyciem 186 dysz
- kąpiel perełkowa przy zastosowaniu 60 dysz
- chromoterapia
- możliwość łączenia ze sobą kilku funkcji
- możliwość kąpieli z użyciem soli mineralnych, olejków i alg
- możliwość kąpieli perełkowej z ozonem

Cechy charakterystyczne:

- 186 dysz do hydromasażu bez podziału na strefy
- 60 dysz powietrznych do masażu perełkowego
- ozonator
- niezależna pompa powietrza
- nowoczesny, automatyczny system przepłukiwania i przedmuchiwania kanałów
- automatyczne napełnianie z termostatem
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- innowacyjny system dezynfekcji i odkamieniania sterowany elektronicznie
- system usuwania wody z całej instalacji wanny
- wielofunkcyjny, kolorowy, elektroniczny panel sterowania
- 2 czujniki temperatury (pomiar przy napełnianiu wanny i podczas zabiegu)
- oszczędzający energię system odzyskiwania ciepła umożliwiający utrzymanie temperatury podczas zabiegu
- prysznic ciepły i zimny
- zagłówek
- stopnie do wanny

Opcje dodatkowe:

- **ZONES 9:** 9 niezależnych stref, 5 programów fabrycznych, 3 programy użytkownika
- **CHROMO 2R:** chromoterapia: 2 reflektory
- **CHROMO 4R:** chromoterapia: 4 reflektory
- **CHROMO 12:** chromoterapia: 12 pojedynczych źródeł światła
- **CHROMO 24:** chromoterapia: 24 pojedyncze źródła światła
- **CHROMO 36:** chromoterapia: 36 pojedynczych źródeł światła
- **AUDIO:** sterowanie zewnętrzne - możliwość podłączenia wieży, mp3 itp. Złącze MiniJack, łącze Bluetooth
- **AROMA:** zbiornik na 1 zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą przycisku


Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania niecki wanny w innych kolorach (termin oraz koszt do indywidualnego ustalenia).



Niecka biała



Niecka calypso

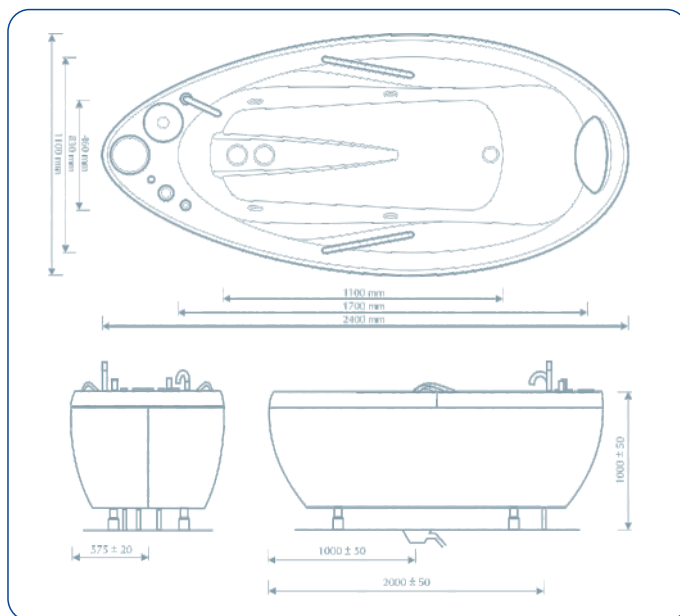

Stopień do wanny



Elektroniczny panel (Wyświetlacz LCD)



Zagłówek (biały)

DANE TECHNICZNE

Pojemność zabiegowa [l]:	160
Pojemność do przelewu [l]:	250
Czas napełniania / spustu [min]:	ok. 3
Pobór mocy [kW]:	max. 3,6
Zasilanie [V/Hz]:	trójfazowe 400/50
Wymiary (dł. x szer. x wys. [mm]):	2400 x 1100 x 1000
Masa [kg]:	220 - z pełnym wyposażeniem
Bezpieczeństwo elektryczne:	klasa I, typ B

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania niecki wanny w innych kolorach (termin oraz koszt do indywidualnego ustalenia).