

## BALMED

Kąpiele balneologiczne (solankowe, kwasowęglowe oraz borowinowe)



efektywność leczenia

szerokie zastosowanie:

- rehabilitacja
- profilaktyka
- relaks

NOWOŚĆ



# BALMED

Nowoczesna wanna medyczna, specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do wykonywania kąpeli balneologicznych: kwasowogłowych, solankowych lub borowinowych.

Ergonomicznie ukształtowana niecka wanny z doskonałym oparciem dla głowy i ramion wykonywana jest z wysokiej klasy akrylu odpornego na działanie temperatury i czynników chemicznych. W standardzie niecka jest w kolorze zielonym Calypso lub białym.

Biała obudowa zewnętrzna wanny wykonana jest z akrylu wzmocnionego laminatem poliestrowym. Instalacja wodna (z wyjątkiem złączy) wykonana została z tworzywa sztucznego.

## Opcje dodatkowe:

- **AIR 64** - 64 dysze powietrzne do masażu peryferyjnego, system podgrzewania powietrza, niezależna pompa powietrza
- **SPUST XL** - spust wody o większej średnicy dla kąpeli w zawieszinach, np. w borowinie
- **CHROMO 2R** - chromoterapia: 2 reflektory
- **CHROMO 4R** - chromoterapia: 4 reflektory
- **CHROMO 12** - chromoterapia: 12 pojedynczych źródeł światła
- **CHROMO 24** - chromoterapia: 24 pojedynczych źródeł światła
- **CHROMO 36** - chromoterapia: 36 pojedynczych źródeł światła
- **AUDIO** - sterowanie zewnętrzne - możliwość podłączenia wieży, mp3, itp., złącze MiniJack, łącze Bluetooth



## BALMED jest dostępny w następujących wersjach:

- **STANDARD** - ekonomiczne zużycie wody - min. 150 l, max. 300 l, doprowadzenia wody: ciepłej i zimnej, prysznic ciepły, 3 rodzaje mediów: woda nasycona CO<sub>2</sub>, solanka ciepła i zimna.
- **ECO** - o zmniejszonej pojemności obniżającej koszt zabiegu, ekonomiczne zużycie wody - min. 140 l, max. 240 l, doprowadzenia wody: ciepłej i zimnej, prysznic ciepły, 3 rodzaje mediów: woda nasycona CO<sub>2</sub>, solanka ciepła i zimna.

## BALMED Dane techniczne:

	ECO	STANDARD
Pojemność [l]:	140 - 240	150 - 300
Wymiary(dł. x szer. x wys.) [mm]:	1950x750x760	1950x750x760
Liczba dysz napełniających:	2	2
Czas napełniania [min.]:	3	3,5
Czas opróżniania [min.]:	5	5
Zasilanie (z opcjami: AIR 64, CHROMO lub AUDIO) [V/Hz]:	230/50	230/50

# CARBOSAT


niesyfonowana butla CO<sub>2</sub>

Podgrzewacz zapobiegający zamarzaniu

Nowoczesny, wysokowydajny aparat do nasycenia wody dwutlenkiem węgla. Urządzenie pracuje w trybie ciągłym - użytkownik może pobierać na bieżąco wodę nasyconą CO<sub>2</sub>.

- 1 zawór bezpieczeństwa
- 2 układ doprowadzenia H<sub>2</sub>O
- 3 skrzynka sterownicza
- 4 układ doprowadzenia CO<sub>2</sub>
- 5 kolumna saturatora
- 6 spust zaworu bezpieczeństwa
- 7 zawór wody saturowanej

CARBOSAT

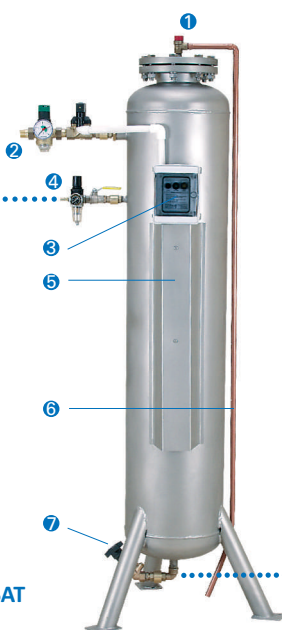

## CARBOSAT Dane techniczne:

Przyłącze wody zimnej [GZ]:	DN 20 3/4"
Przyłącze odpływu wody nasyconej [GZ]:	DN 20 3/4"
Wysokość / średnica [mm]:	1870/324
Przyłącze CO <sub>2</sub> [mm]:	ID 8 drain
Wydajność [l/min.]:	max. 50
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Napięcie sterujące [V/Hz]:	24/50
Maks. liczba podłączonych wanien:	5



BALMED